

# IPS Style®

La prima metalloceramica brevettata con ossiapatite

**MAKE IT YOUR!**  
**STYLE YOUR!**



ivoclar  
vivadent®  
passion vision innovation

# STYLE.

## *365 giorni di metalloceramica*

In molti laboratori la metalloceramica è tuttora una compagna quotidiana. L'utilizzo è ormai ovvio, i risultati sono prevedibili. La sua affidabilità clinica convince contribuendo al successo del laboratorio.

Con 40 anni di esperienza nel campo della metalloceramica Ivoclar Vivadent si interfaccia alle conoscenze raccolte nel tempo:

**IPS Style è una metalloceramica, che finora non c'era.**

**Make it your Style!**



## Quali sono le particolarità di IPS Style®?

IPS Style® è la prima metalloceramica brevettata con cristalli di ossiapatite. Questi vengono combinati con i noti cristalli di leucite e fluoroapatite. Grazie a calibrate fasi di vetro, la lavorabilità e le caratteristiche ottiche di questa ceramica a bassa fusione, a base di vetri misti, sono uniche nel suo genere.

IPS Style non è solo rapida e semplice, ma anche altamente estetica: La ceramica per il classico campo CET è coordinata all'assortimento supercolori e glasura universali IPS Ivocolor.

### Cosa significa?

La minima contrazione fa risparmiare tempo. **Make it fast.**

Il semplice utilizzo offre sicurezza. **Make it easy.**


L'ossiapatite controlla traslucenza ed effetto di profondità. **Make it natural.**



#### Tre importanti cristalli in una ricetta:


##### Ossiapatite aghiforme

Mirato controllo di traslucenza e opacità  
(ingrandimento 10'000)

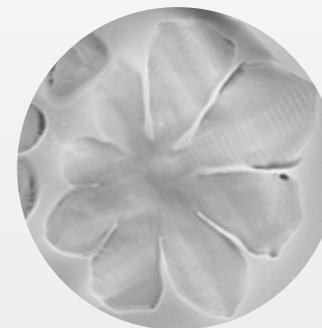

##### Leucite cristallina

Espansione controllata e resistenza  
(ingrandimento x8.200)

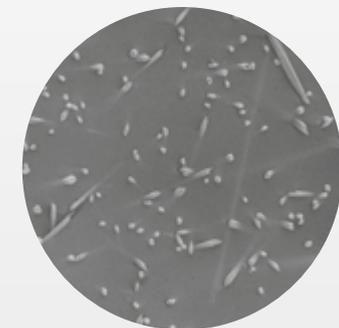

##### Fluoroapatite ad aghi sottili

Naturale luminosità di base, Vitalità e potere espressivo  
(ingrandimento 10'000)

# MAKE IT FAST.

*IPS Style® è veloce...*

## Comportamento di contrazione ottimizzato

La contrazione odontotecnica ottimizzata di IPS Style porta in breve tempo al risultato desiderato. Già dopo la prima cottura corrisponde già quasi al contorno finale.



Classica metalloceramica



IPS Style®

Comportamento di contrazione della ceramica ed umettamento dell'opaquer a confronto:

In condizioni standardizzate di test\* IPS Style® presenta un risultato di cottura visibilmente migliore di una classica metalloceramica.

\*Fonte: R&S Ivoclar Vivadent, Schaan, 2015

## Elevata stabilità dei bordi

La forma modellata, dettagli elaborati e la morfologia rimangono inalterate durante le cotture. Questo riduce il numero di cotture e fa risparmiare tempo prezioso.



” *IPS Style è un materiale molto estetico con un particolare effetto di luminosità. Apprezzo anche la semplice modellabilità del materiale e la minima contrazione. In tal modo i restauri possono essere realizzati in modo più semplice e privo di stress. Questo è un enorme vantaggio!* ”



Odt. Gérald Ubassy,  
Laboratoire dentaire et Centre de  
Formation International, Francia

... e ancora più veloce

## Stratificazione con una sola massa

Già le masse da stratificazione IPS Style per la classica tecnica di pluristratificazione facilitano notevolmente la quotidianità. La massa da stratificazione IPS Style Ceram One provvede ad un'efficienza ancora maggiore.

Qui le masse dentina e smalto sono combinate in modo ideale fra di loro. La modellazione interamente anatomica di restauri in metalloceramica è ancora più semplice e consente di ottenere una naturale colorazione e traslucenza.

## Solida base cristallina

I due opaquer IPS Style Ceram possiedono la stessa architettura chimica delle masse da stratificazione IPS Style. Anche in spessori molto sottili si ottiene un'elevato potere coprente, sia che siano applicate classicamente che con la tecnica a spruzzo.

Questo grazie ai cristalli di ossiapatite: contenuti in quota particolarmente elevata negli Opaquer. Grazie al loro potere riflettente, i cristalli raggiungono un potere luminoso dal profondo, sia che si utilizzi l'opaquer in pasta che quello in polvere.



Odt. Milos Miladinov, Romania

” Mi convincono la forza e l'espressività della ceramica. IPS Style vive del legame dell'Opaquer, che agisce dal profondo, con i molti diversi materiali da stratificazione, che danno una nuova definizione di estetica. ”



Mastro Odt.  
Christoph Andres,  
Zahntechnik Andres,  
Svizzera

# MAKE IT EASY.

*IPS Style® è semplice...*

**Eccellente resistenza,  
lavorabilità intuitiva**

IPS Style si lavora come ogni convenzionale metalloceramica.

La differenza sostanziale: un'eccellente resistenza e semplice modellabilità del materiale. Le masse da stratificazione rimangono eccezionalmente stabili.

IPS Style favorisce i nuovi utilizzatori e gli utilizzatori esperti allo stesso tempo nel loro stile di lavorazione: per ottenere risultati convincenti.



... e facilita la quotidianità

## Aperta per tutte le strutture

IPS Style è indicata per tutte le strutture nel campo CET indicato, indipendentemente dal procedimento con cui sono state realizzate. Sia che si tratti di metallo nobile o vile, digitale o analogico, fuso o fresato.

Su leghe metalliche vili come p.es. Colado® CAD CoCr4 oppure Colado® CC, IPS Style può essere utilizzata per il rivestimento estetico addirittura senza Bonder, per una funzionalità illimitata in poche fasi di lavoro.



I dischi Colado® CAD CoCr4 possono ad esempio essere fresati con la fresatrice PrograMill® PM7 e quindi essere rivestiti esteticamente con IPS Style®.

## Schema di stratificazione calibrato

Lo schema di stratificazione uniforme della metalloceramica IPS Style e della ceramica integrale IPS e.max® consente di elaborare casi clinici complessi con diversi materiale ottenendo un aspetto armonico globale.



Mastro Odt. Oliver Morhofer; Dr. Baris Yanik, Germania

”

*IPS Style è una metalloceramica, che può essere commisurata alla ceramica integrale IPS e.max. Le possibilità di combinazione di diversi materiali, anche nelle aree che richiedono elevata estetica, mi hanno affascinato e convinto.*

”



Mastro Odt.  
Oliver Morhofer,  
High-Tech-Dental,  
Germania

# MAKE IT NATURAL.

*IPS Style® è estetica...*

## Illimitati giochi di luce

In tutte le componenti colorate di IPS Style, dall'opacuer fino allo smalto sono contenuti cristalli di ossiapatite. Questo porta ad un'eccellente luminosità di base e, intraoralmente, a risultati di effetto naturale. Indipendentemente dal numero di cotture, i restauri realizzati convincono grazie ad un'elevata stabilità cromatica. Con l'ampia scelta di masse a disposizione, l'individualità ottiene lo spazio che le compete.




H. & D. Crescenzo; Dr. Michel Becker, Francia



... e conferisce un estetico effetto di profondità

## Che effetto hanno i cristalli di ossiapatite?

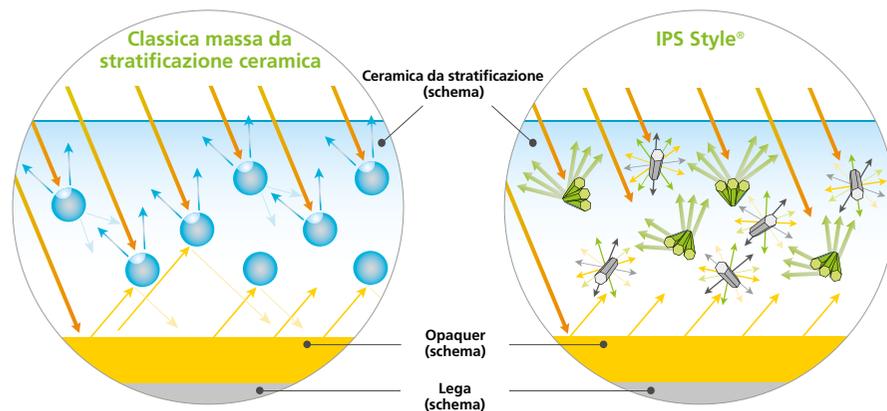

L'opacità convenzionale, causata da un'elevata quota di pigmenti opacizzanti: la luce incidente viene riflessa superficialmente ed in parte assorbita nella massa da stratificazione. Il materiale appare opaco. Il colore dell'opaquer non può agire dal profondo.

Torbidità causata da cristalli aghiformi: la luce incidente viene dispersa e riflessa diffusamente. L'elevato potere di rifrazione dei cristalli determina l'estetica ed include anche il colore dell'Opaquer nella gestione del colore e della luce del restauro.

## Materiale con elevata luminosità

Cristalli di fluoroapatite in forma di sottili aghi, grazie alla dispersione ed al riflesso diffuso della luce, portano ad un'elevata luminosità. Cristalli di ossiapatite aghiforme possiedono un'elevato potere rifrangente, che produce effetto di profondità. Il contenuto di cristalli di ossiapatite varia dall'opaquer fino alle masse smalto. Nello strato di opaquer la componente è particolarmente elevata, per consentire un mirato controllo della traslucenza.



Lavorare con IPS Style è stato un piacere fin dall'inizio. I restauri sono molto vitali e presentano un'ottima naturalezza. Per noi IPS Style come metalloceramica è il completamento della ceramica integrale IPS e.max. Con IPS Style c'è molto da scoprire - la ceramica consente, come anche IPS e.max, molte tecniche.



Hélène & Didier Crescenzo,  
Laboratory Esthetic Oral,  
Francia

# MAKE IT UNIQUE.

*IPS Style® è perfetta per il laboratorio...*

## Supercolori e glasura universali

IPS Ivocolor è indicato per la caratterizzazione individuale di IPS Style.  
È coordinato calibrato con tutte\* le ceramiche Press, CAD e da stratificazione della Ivoclar Vivadent, fra l'altro anche con la ceramica integrale IPS e.max®.



## Forni per cottura ceramica intelligenti

Per la cottura dei restauri IPS Style i corrispettivi parametri di cottura sono già preimpostati nei forni per cottura Programat®.

Il brevettato Digital Shade Assistant (DSA) del forno per cottura Programat P710 e P510 è inoltre di aiuto nella determinazione del colore dentale. Questo pratico assistente, compara il valore della scala colori con il colore del dente naturale.

\* eccetto su restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati



*... e provvede anche nello studio alla perfezione*

## L'adatta cementazione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style si possono cementare efficientemente con SpeedCEM® Plus, il cemento composito autoadesivo.

Per la cementazione di faccette in IPS Style è particolarmente indicato Variolink® Esthetic, il cemento composito estetico per la cementazione definitiva di restauri in ceramica di elevata qualità.



## Cura e protezione

I restauri rivestiti esteticamente con IPS Style, devono essere curati professionalmente e nel tempo così come anche la gengiva e le mucose. La lacca di protezione Cervitec® Plus con clorexidina e timolo offre una protezione nell'ambito dell'assicurazione della qualità di trattamenti restaurativi.

Cervitec Plus è applicabile nello studio dentistico in modo mirato nei punti a rischio, come p.es. lungo i bordi di corone e ponti.





## Protesi fissa



IPS Style® è un prodotto della categoria "Protesi fissa". I prodotti di questa categoria coprono l'intero iter di realizzazione di un restauro protesico fisso, dall'attuazione del provvisorio fino alla cura nel tempo del restauro definitivo. I prodotti sono calibrati in modo ottimale fra di loro e consentono una lavorazione ed un'applicazione di successo.



### QUESTI SONO ULTERIORI PRODOTTI DI QUESTA CATEGORIA:

#### Leghe

Varietà di leghe che unisce



Competenza, qualità, fiducia

- Ampia scelta di leghe
- Perfettamente calibrate con ceramiche e compositi da rivestimento estetico
- Oltre 100 anni di esperienza nel campo delle leghe

#### IPS Ivocolor

Supercolori e glasura universali



Una per tutte

- Versatili – compatibili con tutte le ceramiche IPS\*
- Flessibili – dalla pittura e glasura fino alla miscelazione nelle masse ceramiche
- Estetico – colori di effetto naturale

\* eccetto i restauri IPS e.max® CAD e CAD-on non cristallizzati

**Desidera saperne di più sui prodotti della categoria "Protesi fissa"?**  
**Per informazioni visiti il sito [www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)**

Produttore e distributore  
**Ivoclar Vivadent AG**  
Benderstr. 2  
9494 Schaan  
Liechtenstein  
Tel. +423 235 35 35  
Fax +423 235 33 60  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

Distribuzione Italia  
**Ivoclar Vivadent srl**  
Via del Lavoro, 47  
I - 40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Tel. +39 051 611 3555  
Fax +39 051 611 3565  
[info@ivoclarvivadent.it](mailto:info@ivoclarvivadent.it)  
[www.ivoclarvivadent.it](http://www.ivoclarvivadent.it)

Le descrizioni ed i dati non costituiscono alcuna garanzia delle proprietà del prodotto.  
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein  
IT/2019-09-13

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation