


Parallel Guide Kit

Osstem Surgical Guide

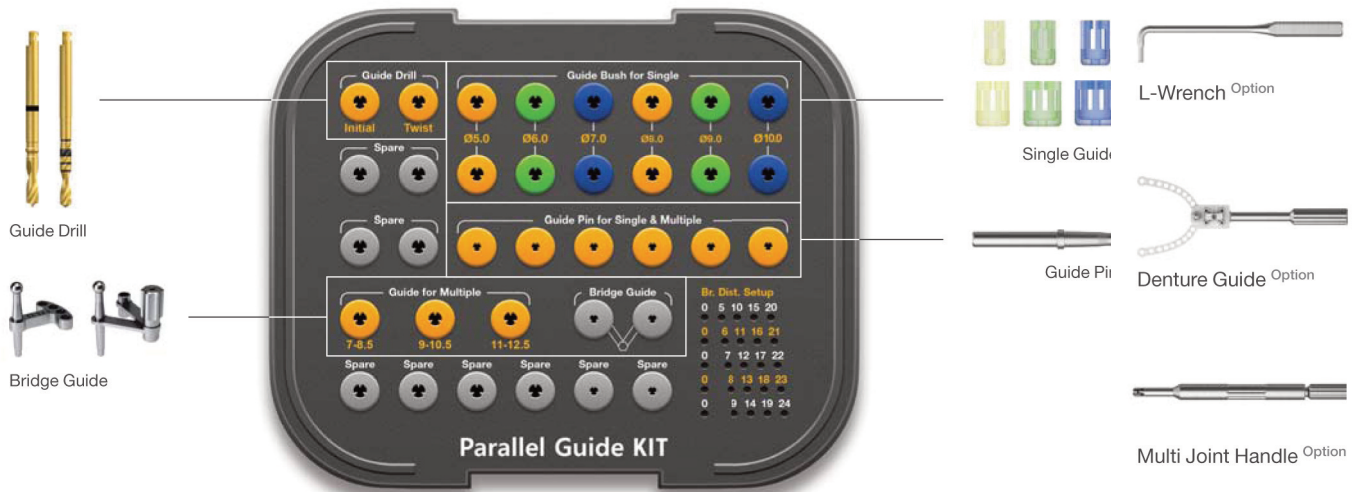

Guide Drill

- Fresa iniziale: fissata alla Single Guide per il fresaggio iniziale, consente di fermare la perforazione ad una profondità di 7 mm
- Fresa Twist: utilizzata con Bridge Guide per il fresaggio iniziale, consente di regolare la profondità attraverso la marcatura di riferimento

Single Guide

- Materiale trasparente usato per riconoscere la posizione e la direzione del fresaggio
- Funzione di fresa iniziale: stopper alla profondità 7 mm
- 6 tipologie, disponibile da $\varnothing 5$ a $\varnothing 10$ sulla base del diametro della corona mesio-distale

Bridge Guide

- Regolazione la distanza e la direzione della foratura
- Tipo a ventaglio: intervallo da 7.0 - a 12,5 mm, con incrementi di 0,5 mm
- Tipo a compasso: regolabile da 5 - a 24 mm, con incrementi di 1 mm

