

CAS KIT (IHCRSNK)

Per **TSII / III** **ETIII** **SSII / III** **USII / III**

Kit Sinusale ad approccio crestale

- Kit ottimizzato per approccio crestale durante la chirurgia del seno mascellare
- Le frese **Cas** realizzano un accesso crestale in sicurezza, per il sollevamento della membrana sinusale ed il contestuale inserimento implantare disponibili misure da Ø2.8 a Ø4.1
- Gli stop di sicurezza presenti nel CAS KIT permettono un approccio al seno mascellare senza perforazione della membrana

Velocità frese (utilizzo max 50 volte)

- Fresa Twist: 800 -1200 Rpm
- Fresa Cas: 400 -800 Rpm

Componenti pannello inferiore

Condensatore per osso
ISNBC1114



Testa trasportatore osso
ISNBCH30



Tubi per sollevatore idraulico di membrana
ISNMT




Trasportatore osso
ISNBCS35




OPZIONALE

Connettore a Y
ISNYCT

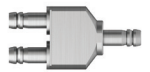

KIT CHIRURGICI

100

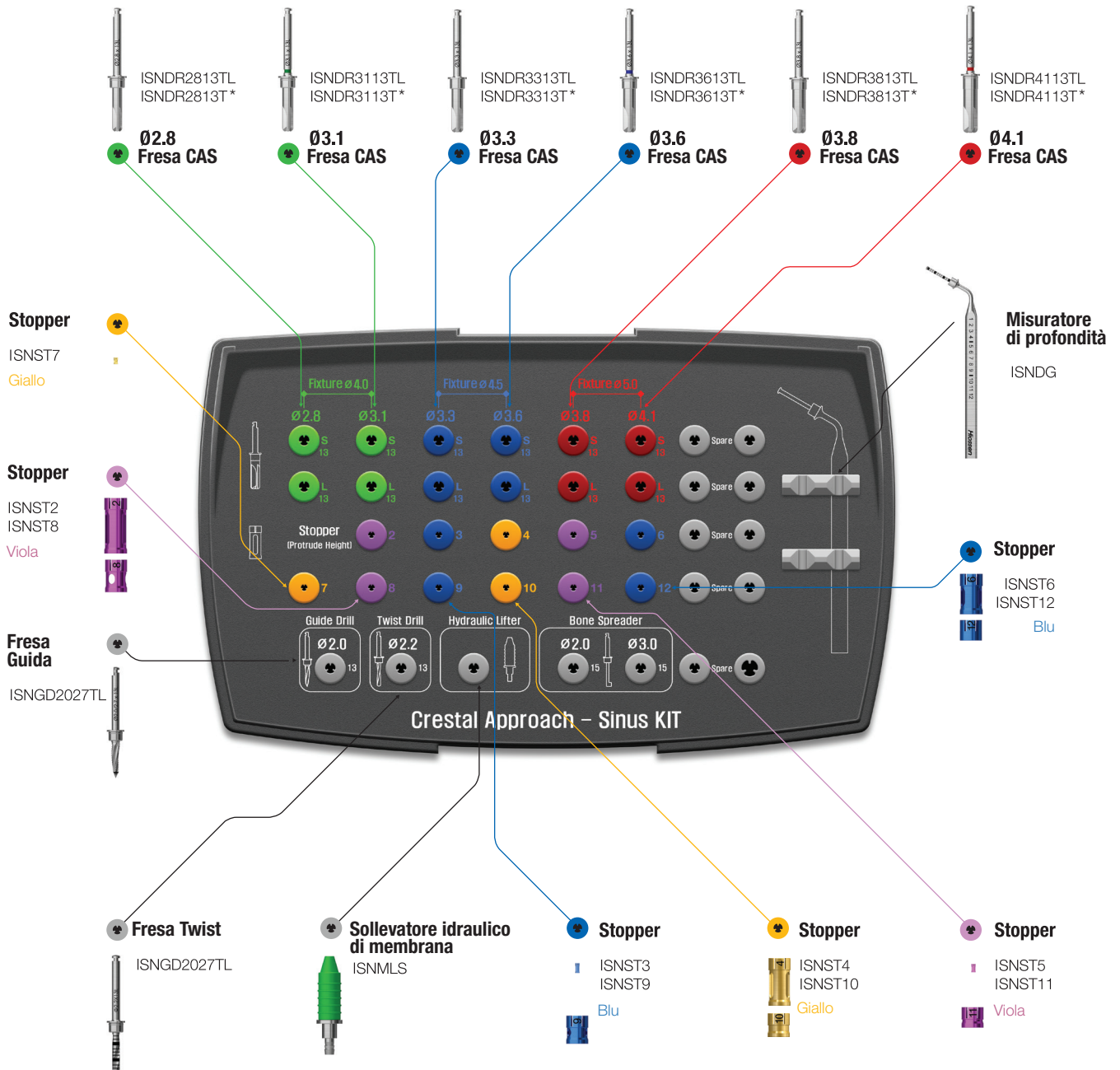

* Frese Short opzionali